


Orthoses are our passion

Mediroyalin NRX®- ja ARX® Strap

– Rajattomasti vaihtoehtoja tuentaan!

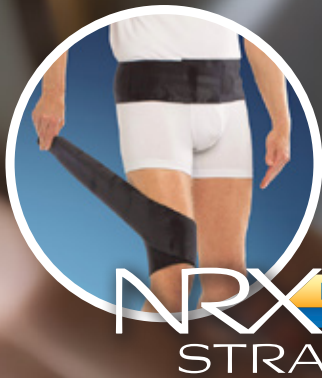


NRX[®] STRAP BY MEDIROYAL



MediRoyalin kehittämä NRX[®] Strap tarjoaa uusia mahdollisuuksia ortopediseen tuentaan. Joustavaa nauhaa voidaan käyttää kuntoutuksen aikana tuentaan tai vamman selvittämiseen. Nauhaa voidaan käyttää yksilöllisesti potilaan tarpeen mukaan. NRX[®] Strap on elastisuudeltaan eri vahvuisia, mikä mahdollistaa kompression käytön osana hoitoa. Nauhaa on myös eri levyisenä.

Mikäli vamman hoito vaatii enemmän tukea ilman lisäkompressiota, voidaan ensimmäisen nauhan päälle asettaa toinen, vahvempi nauha. NRX[®]-materiaalia voidaan leikata saksilla sopivan mittaiseksi. Lisäksi siihen voidaan tehdä myös reikiä, joita voidaan käyttää stabilointiin.

– NRX[®] Strap voidaan käytännössä käyttää ilman rajoituksia.

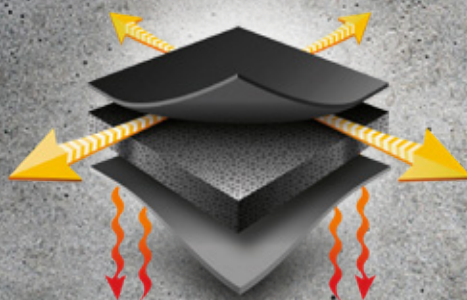

– *Rajattomasti vaihtoehtoja tuentaan!*



NRX[®] Strap on valmistettu täysin ilman lateksia. Nauhan pinta on hengittävää ja se tarttuu ihoon lisäten proprioseptiikkaa, lihaskuuntelua ja nivelten asentotuntoa.

NRX[®] Strap toimitetaan rullana ja sitä voidaan leikata rullasta yksilöllisesti sopivan mittaiseksi. Materiaali on helposti muokattavissa potilaan tarpeiden mukaiseksi ja nauha kiinnitetään toisesta päästä tarralla itseensä. Potilas voi myös käyttää samaa nauhaa uudelleen.

Materiaali voidaan pestä 60 ° C pesukoneessa.



mediroyal

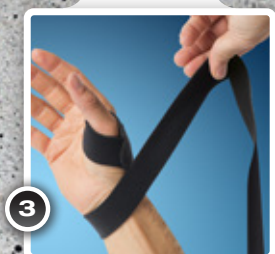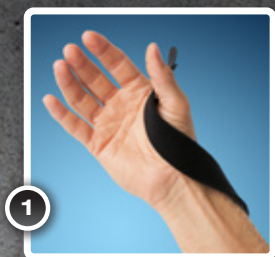

NRX® Strap edut

+ Proprioseptiikka, nivelen asentotunto ja lihasmuisti

NRX® Strap on useita mielenkiintoisia vaikutuksia, joita voidaan käyttää kuntoutuksen hyötynä. Sisäpinnan materiaali tarttuu ihoon lisäten proprioseptiikkaa ja nivelen asentotuntoa. NRX® Strap voidaan käyttää myös asiakkaan lihasmuistin harjoittamiseen ja tukemiseen.

+ Paikallinen kompressio

Materiaalin elastisuus tarjoaa hyvän kompression, joka tukee paikallisesti haluttua niveltä ja vähentää turvotusta. Turvotus on usein pääsyy nivelen liikerajoituksiin.

+ Tuki

Kompressio ja eri NRX®-materiaalien eri vahvuudet mahdollistavat juuri oikean vahvuuden tuennan käytön. Nauhaa voidaan käyttää rajoittamaan vain tietty liikesuunta ilman, että niveltä tuetaan liikaa. Tämä sallii enemmän nivelen luonnollista liikettä ja lihasten aktiivisuutta.

+ Lämpövaikutus

NRX®-materiaali lisää lämpöä paikallisesti. Lämpö tekee lihaksista, nivelsiteistä ja kollageenista elastisempaa ja joustavampaa, joka vähentää kipua ja tulehdusta.

+ Hengittävä

NRX®-materiaalin pinta on hengittävä pitäen ihon kuivana ja lämpimänä.

+ Eri tukitasot

NRX® Strap, NRX® Strap PLUS ja NRX® Strap Double tarjoavat eri tasoisia tukivaihtoehtoja riippuen tarvittavasta tuesta. Kaikkia materiaaleja voidaan yhdistellä keskenään.

+ Ihoystävällisyys

NRX®-materiaali on testattu ihoärsytysten varalta. Materiaalin valmistuksessa ei ole käytetty lainkaan lateksia.

+ Uudelleen käytettävä ja pestävä

NRX® Strap voidaan käyttää uudelleen ja se voidaan konepestä 60 ° C.

+ Vedenkestävä


NRX®-materiaali kestää hyvin vettä, joten sitä voidaan käyttää myös vesiliikunnan aikana.

NRX[®] BY MEDIROYAL STRAP

NRX[®] Strap on monikäyttöisin ja mukautuvin versio nauhoista. Siinä on keskitason tuenta ja suuri elastisuus. Sisäpinnan materiaali lisää kitkaa iholla lisäten proprioseptiikkaa. Pinnan materiaaliin saadaan kiinnitettyä tukevasti tarranauha, jolla tuki saadaan stabiloitua paikoilleen.


NRX[®] Strap voi tehdä yksinkertaiset sovellukset, joita voi muokata tukevammaksi NRX[®] Strap PLUS:n ja NRX[®] Strap Double avulla.

- Keskitason tuenta
- Suuri elastisuus
- Sisäpinta luo kitkaa ihoa vasten ja auttaa nauhaa tarttumaan iholle

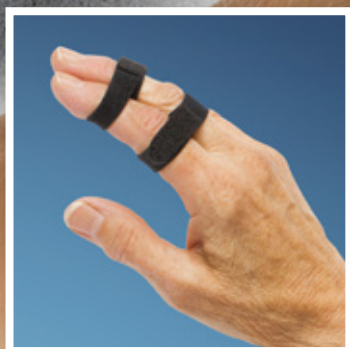

mediroyal



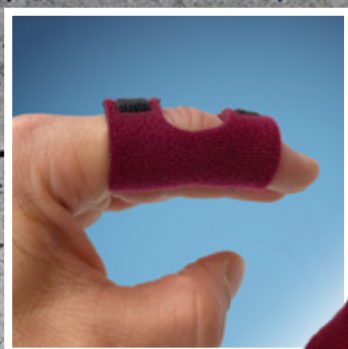

NRX COLORS[®]
BY MEDIROYAL
STRAP



NRX® Strap on saatavilla seuraavina leveyksinä ja väreinä. 30 mm ja 50 mm leveyden rullien mukana toimitetaan 10 kpl valmiiksi leikattuja tarranauhoja. 110 mm leveän rullan mukana toimitetaan 5 kpl tarranauhoja.

NRX® Strap – 30 mm

- EU446030 NRX® Strap · 30 mm x 3,1 m · Musta
- EU446230 NRX® Strap Colors · 30 mm x 3,1 m · Sininen
- EU446330 NRX® Strap Colors · 30 mm x 3,1 m · Punainen

NRX® Strap – 50 mm

- EU446050 NRX® Strap · 50 mm x 3,1 m · Musta
- EU446250 NRX® Strap Colors · 50 mm x 3,1 m · Sininen
- EU446350 NRX® Strap Colors · 50 mm x 31, m · Punainen

NRX® Strap – 110 mm

- EU446110 NRX® Strap · 110 mm x 3,1 m · Musta
- EU446210 NRX® Strap Colors · 110 mm x 3,1 m · Sininen
- EU446310 NRX® Strap Colors · 110 mm x 3,1 m · Punainen



NRX[®] DOUBLE[®] STRAP

NRX[®] Strap Doublea käytetään useimmiten lantion tai vartalon stabilointiremminä tai jos nauhan ei ole välttämätöntä tarrautua ihoon. NRX[®] Strap Doublen molemmat pinnat ovat samanlaisia eikä siinä ole kitkaa lisäävää sisäpintaa, eli se ei tartu iholle. Nauhassa on keskivahva tuenta ja venyvyys on rajoitetumpi kuin NRX[®] Strap:ssa.

NRX[®] Strap Doublea voidaan käyttää rotaation vahvistamiseen, johon se sopii hyvin vähäisemmän elastisuuden ansiosta.

- Keskitason tuenta
- Rajoitettu elastisuus
- Ei kitkaa lisäävää sisäpintaa



NRX[®] Strap Double on saatavilla seuraavina leveyksinä. 30 mm ja 50 mm levyisten rullien mukana toimitetaan 10 kpl valmiiksi leikattuja tarranauhoja. 110 mm levyisen rullan mukana toimitetaan 5 kpl tarranauhoja.

NRX[®] Double – 30 mm

■ EU447030 NRX[®] Strap Double · 30 mm x 3,1 m · Musta

NRX[®] Double – 50 mm

■ EU447050 NRX[®] Strap Double · 50 mm x 3,1 m · Musta

NRX[®] Double – 110 mm

■ EU447110 NRX[®] Strap Double · 110 mm x 3,1 m · Musta

NRX[®] Double – 300 mm

– HUOM! 300 mm leveään nauhan mukana ei toimiteta valmiiksi leikattuja tarranauhoja!

■ EU447300 NRX[®] Strap Double · 300 mm x 3,1 m · Musta



NRX⁺ PLUS[®] STRAP BY MEDIROYAL

NRX[®] Strap PLUS tarjoaa vahvaa tuentaa lähes joustamattomana nauhana. Nauhan sisäpinnalla on kitkaa lisäävä pinta, joka auttaa sitä tarttumaan ihoon.

Nauhaa kuitenkin suositellaan käytettäväksi lähinnä NRX[®] Strap PLUS:n tai NRX[®] Strap Doublen päällä antamassa lisätukea.

NRX[®] Strap PLUS:aa voidaan käyttää myös suoraan iholla muiden nauhojen kiinnityskohdassa, mikäli kiinnityskohtiin tarvitaan jäykkä materiaali.

- **Vahva tuenta**
- **Ei-elastinen**
- **Sisäpinta luo kitkaa ihoa vasten ja auttaa nauhaa tarttumaan iholle**

NRX[®] Strap PLUS:aa on saatavilla seuraavina leveyksinä. 30 mm, 50 mm ja 80 mm levyisten rullien mukana toimitetaan 10 kpl valmiiksi leikattuja tarranauhoja. 110 mm levyisen rullan mukana toimitetaan 5 kpl tarranauhoja.

NRX[®] Strap PLUS – 30 mm

- EU449030 NRX[®] Strap PLUS · 30 mm x 3,1 m · Musta

NRX[®] Strap PLUS – 50 mm

- EU449050 NRX[®] Strap PLUS · 50 mm x 3,1 m · Musta

NRX[®] Strap PLUS – 80 mm

- EU449080 NRX[®] Strap PLUS · 80 mm x 3,1 m · Musta

NRX[®] Strap PLUS –110 mm

- EU449110 NRX[®] Strap PLUS · 110 mm x 3,1 m · Musta



ARX[®] SOFT
BY MEDIROYAL[®]
STRAP

–Tulevaisuus jo tänään!

ARX[®] Strap kiinnittyy itsestään eikä siihen tarvitse erillistä tarranauhaa. ARX[®]-materiaali on tehty kahdesta kankaasta, jotka kiinnittyvät toisiinsa itsestään. Mitä pienempää osaa materiaalista tarvitaan, sitä paremmin kankaat kiinnittyvät toisiinsa.

Parhaiten materiaali sopii sormien, peukalon ja käden tuentaan, mutta se toimii myös kyynärpään tuentaan. Nauhan sisäpinnalla ei ole kitkaa aiheuttavaa pintaa. Materiaali on erittäin hengittävää ja se voidaan konepestä 40 ° C. Ei huuhteluainetta.

- **Keskivahva tuenta**
- **Vähäinen joustavuus**
- **Hengittävä**



ARX[®] Strap on saatavilla seuraavina leveyksinä:

ARX[®] Strap – 30 mm

■ EU448030 ARX[®] Strap · 30 mm x 3,1 m · Musta/Harmaa

ARX[®] Strap – 50 mm

■ EU448050 ARX[®] Strap · 50 mm x 3,1 m · Musta/Harmaa

ARX[®] Strap – 110 mm

■ EU448110 ARX[®] Strap · 110 mm x 3,1 m · Musta/Harmaa

ARX®-side kaksois-sormille

Side on tehty ARX®-materiaalista leikatuista, 13 mm leveistä, nauhoista, joissa on silmukat toisella puolella.

Tämä on erinomainen sormen instabiliteetin, murtuman tai neurologisen oireen hoitoon, jos yksi sormi vaatii tukea toiselta sormelta. Samankaltaista sidettä voidaan käyttää myös varpaissa.


ARX®-side kaksois-sormille

- EU448013 ARX®-side kaksois-sormille · 13 mm leveys · 5-pack
- EU448014 ARX®-side kaksois-sormille · 13 mm leveys · 25-pack
- EU448015 ARX®-side kaksois-sormille · 13 mm leveys · 50-pack



NRX® yhdessä ortoosien kanssa

NRX® Strap voidaan helposti yhdistää ortoosiin lisätoimintojen lisäämiseksi. Mediroyal ErixThree® Neuro Shoulder, Manex Radial 2.0 ja Mediroyal Tonus® spastisuuden vastaiset ortoosit ovat vain muutamia esimerkkejä.

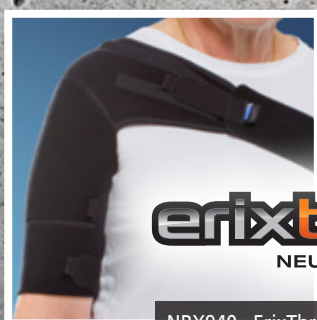

NRX940 · ErixThree Neuro



MR2285
Manex Radial 2.0



TONUS 



NRX® Lisäosat

NRX® lisäosat ovat tarranauhaa, joka on kehitetty käytettäväksi erityisesti NRX® Strap kanssa. Niitä on saatavilla sekä valmiiksi leikattuina paloina tai rullana.

NRX® Valmiiksi leikattu tarranauha

Valmiiksi leikatun tarranauhan paketit ovat samoja, jotka toimitetaan NRX® Strap mukana, mutta niitä on saatavilla myös erikseen. Ne ovat pakattu valmiiksi paketteihin, josta niitä voidaan ottaa suoraan käyttöön


- EU446001 NRX® Valmiiksi leikattu tarra · Musta · 10 kpl/pack – sopii 30 mm leveään nauhaan
- EU446002 NRX® Valmiiksi leikattu tarra · Musta · 10 kpl/pack – sopii 50 mm ja 80 mm levyisiin nauhoihin
- EU446003 NRX® valmiiksi leikattu tarra · Musta · 5 kpl/pack – sopii 110 and 300 mm levyisiin nauhoihin



NRX® Tarranauha rullassa, matala profiili

NRX®-tarranauhaa on saatavilla myös rullana, josta tarraa on helppo leikata sopivan mittaiseksi..


- EU445060 NRX® Itsetarrautuva tarra · 50 mm x 25 m rulla · Läpinäkyvä
- EU445061 NRX® Tarra · 50 mm x 25 m rulla · Musta
- EU445161 NRX® Vahva tarra · 50 mm x 25 m rulla · Musta

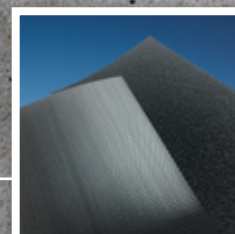

NRX® Elastinen tarranauha

NRX® Elastinen tarranauha tarjoaa korkean luokan tukea ja kompressiota. Sitä voidaan käyttää vartalossa ja lantiossa kompensoimaan ja tukemaan lonkkaa tai alaselkää. Se on myös erinomainen antamaan lisäkompressiota muiden NRX® -nauhojen päällä.

- EU445070 NRX® Elastinen tarranauha · 50 mm x 25 m rulla · Musta

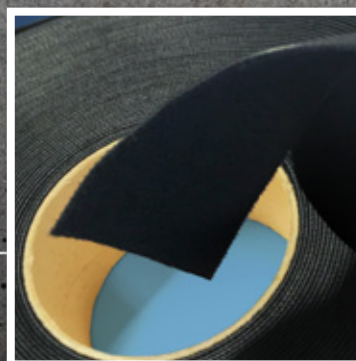

Vertaa materiaaleja ja ominaisuuksia

 NRX® Strap	 NRX® Strap Colors	 NRX® Strap Double	 NRX® Strap PLUS	 ARX® Strap
• Keskitason tuenta • Suuri elastisuus • Sisäpinta luo kitkaa ihoa vasten ja auttaa nauhaa tarttumaan iholle	• Keskitason tuenta • Suuri elastisuus • Sisäpinta luo kitkaa ihoa vasten ja auttaa nauhaa tarttumaan iholle	• Keskitason tuenta • Rajoitettu elastisuus • Ei kitkaa lisäävää sisäpintaa	• Vahva tuenta • Ei-elastinen • Sisäpinta luo kitkaa ihoa vasten ja auttaa nauhaa tarttumaan iholle	• Keskivahva tuenta • Vähäinen joustavuus • Hengittävä
Käytetään kaikenlaisissa perussovelluksissa, missä haluat hyvän kitkavaikutuksen iholle.	Käytetään kaikenlaisissa perussovelluksissa, missä haluat hyvän kitkavaikutuksen iholle.	Käytetään ankkurina lantion luun yläpuolella tai pyörivänä hihnana. Voidaan käyttää myös vartalon ympärillä, jos ihon kitkaa ei tarvita.	Käytetään NRX® Strap ja NRX® Strap Doublen päällä tuen lisäämiseksi	Voidaan käyttää kaikissa raajoissa helpon tuen ja suojauksen aikaansaamiseksi.
30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
EU446030 30 mm x 3,1 m ■ Musta	EU446230 30 mm x 3,1 m ■ Sininen	EU447030 30 mm x 3,1 m ■ Musta	EU449030 30 mm x 3,1 m ■ Musta	EU448030 30 mm x 3,1 m ■ Musta/Harnaa
50 mm	EU446330 30 mm x 3,1 m ■ Punainen	50 mm	50 mm	50 mm
EU446050 50 mm x 3,1 m ■ Musta	50 mm	EU447050 50 mm x 3,1 m ■ Musta	EU449050 50 mm x 3,1 m ■ Musta	EU448050 50 mm x 3,1 m ■ Musta/Harnaa
110 mm	EU446250 50 mm x 3,1 m ■ Sininen	110 mm	80 mm	110 mm
EU446110 110 mm x 3,1 m ■ Musta	EU446350 50 mm x 3,1 m ■ Punainen	EU447110 110 mm x 3,1 m ■ Musta	EU449080 80 mm x 3,1 m ■ Musta	EU448110 110 mm x 3,1 m ■ Musta/Harnaa
Katso lisää NRX® Strap sivuilla 4–5	110 mm	300 mm	110 mm	Katso lisää ARX® Strap sivulta 8
	EU446210 110 mm x 3,1 m ■ Sininen	EU447300 300 mm x 3,1 m ■ Musta	EU449110 110 mm x 3,1 m ■ Musta	
	EU446310 110 mm x 3,1 m ■ Punainen	Katso lisää NRX® Strap Double sivulta 6	Katso lisää NRX® Strap PLUS sivulta 7	
	Katso lisää NRX® Strap Colors sivuilla 4–5			

NRX® BY MEDIROYAL STRAP KITS

The NRX® Strap Kits for fast and easy applications. For more information visit www.mediroyal.se



NRX® is a registered trademark
of Mediroyal Nordic AB, Sweden
© Mediroyal Sweden AB 2019


Palveleva apuvälineliike

Turun Tukikohta Oy
www.turuntukikohta.fi
tilaus@turuntukikohta.fi
p.0207619030

Orthoses are our passion

mediroyal 

Mediroyal Nordic AB
Box 7052 · Staffans väg 6B · SE-192 07 Sollentuna · Sweden
info@mediroyal.se · www.mediroyal.se