



mediroyal

Orthoses are our passion

Sormituki Mediroyal Multi Finger Splint

Sormien vammat ovat monimutkaisia hoidettavia, sillä tuen on oltava matalaprofiilinen, toimiva ja silti monipuolinen ja joustava. Laajan kehitystön ja materiaalitestien seuraksena olemme kehittäneet oman Multi Finger Splintin, jota voidaan käyttää erilaisiin sormiongelmiin. Se on monipuolinen, vaaleanharmaan värinen lasta, jota on saatavana 14 eri kokoa/pituutta.

Flexion

Extension

Tuote on valmistettu nylonista ja polypropyleenista. Materiaali antaa tuelle jäykkyyttä ja vakautta, ollen samalla joustava. Materiaali on lämpömuokattavissa kuumailmapuhaltimella. Optimaalinen lämpötila muokkaukseen on 140–160 astetta.

Osana suunnittelutyötä olemme tehneet lastan toisesta päästä hieman leveämmän ja lisänneet sen ulkopinnalle plus-merkin. Koska useimmat sormet ovat kartiomallisia, tämä muotoilu helpottaa tuen sovittamista ja istuvuutta. Tuen voi pestä saippualla ja vedellä tai desinfiointiaineella.

Lasta voidaan pukea sormeen eri tavoin vakauttamaan joko ekstensiota, fleksiota tai deviaatiota.

Esimerkkejä käyttösovelluksista:

- DIP- tai PIP-nivelen ekstension tuenta Swan neck deformityn tai nivelten epävakauden yhteydessä.
- DIP- tai PIP-nivelen fleksion tuenta, kun nivelessä Mallet finger, boutonnière deformity tai Trigger finger.
- DIP- tai PIP-nivelen deviaation eli sivussuunnan tuenta, ulnaari-/radiaalideviaatiosuunnassa, vamman tai yliliikkuvuuden yhteydessä.

Mediroyal Multi Finger Splint on saatavana yksittäispakattuna, 3-pakkauksessa tai valikoimapakkauksessa, jossa on yksi kutakin kokoa.

Indikaatiot: Swan neck deformity, mallet finger, boutonnière deformity, trigger finger/thumb, ulnar/radial deviation, nivelsidevammat tai nivelen yliliikkuvuus.

© Mediroyal Nordic AB • 2022




Tukikohta
Palveleva apuvälineliike

Kokotaulukko ja saatavilla olevat paketit


Mediroyal Nordic AB
Box 7052 • Staffans väg 6B • SE-192 07 Sollentuna • Sweden • info@mediroyal.se • www.mediroyal.se

Turun Tukikohta Oy • www.turuntukikohta.fi • tilaus@turuntukikohta.fi • p.0207619030

A. Trigger Sormi/peukalo

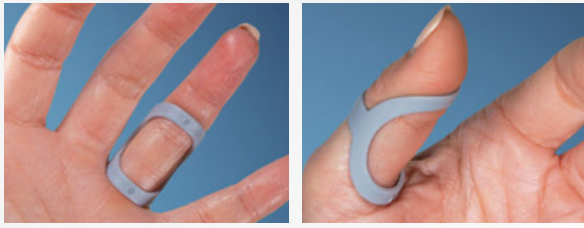


B. Swan Neck Deformity

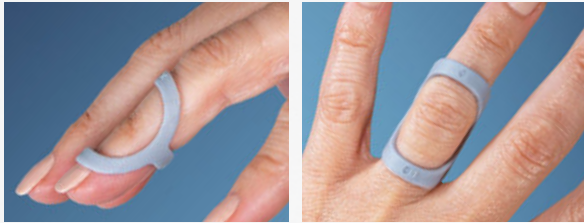

C. Boutonnière Deformity



D. Mallet Sormi

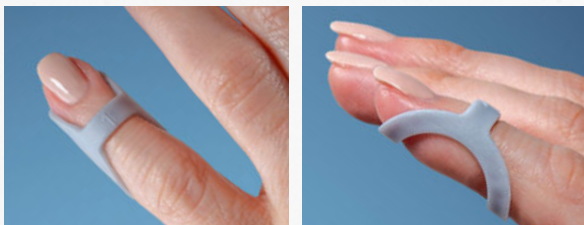

E. Nivelsidevammat tai nivelen yli liikkuvuus



Saatavilla olevat paketit

Multi Finger Splint Yksittäispakkaukset

Koko	Art.no.	Määrä
1	2008-01	yksi kappale
2	2008-02	yksi kappale
3	2008-03	yksi kappale
4	2008-04	yksi kappale
5	2008-05	yksi kappale
6	2008-06	yksi kappale
7	2008-07	yksi kappale
8	2008-08	yksi kappale
9	2008-09	yksi kappale
10	2008-10	yksi kappale
11	2008-11	yksi kappale
12	2008-12	yksi kappale
13	2008-13	yksi kappale
14	2008-14	yksi kappale

Multi Finger Splint 3-pakkaus

Koko	Art.no.	Määrä
1	2008-01/03	3 kpl
2	2008-02/03	3 kpl
3	2008-03/03	3 kpl
4	2008-04/03	3 kpl
5	2008-05/03	3 kpl
6	2008-06/03	3 kpl
7	2008-07/03	3 kpl
8	2008-08/03	3 kpl
9	2008-09/03	3 kpl
10	2008-10/03	3 kpl
11	2008-11/03	3 kpl
12	2008-12/03	3 kpl
13	2008-13/03	3 kpl
14	2008-14/03	3 kpl

Multi Finger Splint - Valikoimapakkaus

Koko	Art.no.	Määrä
1-14	2009	yksi kutakin kokoa

Mittataulukko

Huomaa, että mittataulukko on opas oikean koon valinnassa. Se ei ota huomioon pehmytkudosten turvotusta. Koska useimmat sormet ovat kartiomaisia, tuen toinen puoli on leveämpi tämän kompensoimiseksi. Suosittelemme tuen yksilöllistä sovitusta optimaalisen tuen takaamiseksi.

Koko	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ympärysmitta DIP/PIP joint mm	42-43	44-46	46-50	50-55	55-58	58-60	60-62	62-65	65-68	67-71	71-74	74-77	77-81	81-84
Pituus mm	26	29	31	33	33	35	39	39	40	43	43	45	45	45

