



## PROXI TFCC STRAP



**59,28 €**

### Käyttöaiheet:

- Ranteen distaalisen radioulnaarinivelen (DRUJ) epävakaas eli värttinäluun ja kynnäriluun välisen nivelen epävakaas
  - TFCC-kompleksin vammat
  - Nivelsidevammat alueella
- Ranteen epävakaas kiertoliikkeissä:
  - kiertoon liittyvä napsahdus, kipu, pitovoiman heikentyminen, epävakaas
- Kynnäriluun pään subluksaatio tai kipu/heikkous ranteen kynnäriluuosassa
- TFCC-vammojen kuntoutus

**SKU:** 09MR2707

**Tuote:** Ranteen kiertoja tukeva rannetuki

### Koko- ja tilaustiedot:


Koko määräytyy ranteen ympärysmitan mukaan. Tukea on saatavana kolmessa koossa ja se on puolieroton.

Tuotenumero	Koko	Ranteen ympäryys
MR2707-S	S	12-14cm
MR2707-M	M	14-18cm
MR2707-L	L	18-24cm

MR2707 · Proxi® TFCC Strap			
Koko	S	M	L
Ranteen ympärysmitta	12-14 cm	14-18 cm	18-24 cm



### Lisätiedot:

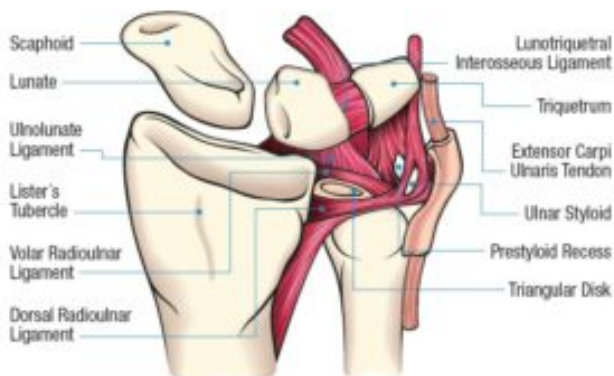

Distaalisen radioulnaarisen nivelen (DRUJ) epävakaus on yleistä TFCC-kompleksin sekä stabiloivien nivelsiteiden vaurioissa. Näillä nivelsiteillä on erittäin tärkeä tehtävä ranteen nivelen vakauttamisessa ranteen kierroissa eli rotaation aikana, ja vammat johtavatkin usein liikeradan vähenemiseen, kipuun, napsumiseen, epävakauteen ja ranteen pitovoiman heikkenemiseen. Yleisin syy vammaan on kaatuminen ranteen päälle rotaatioasennossa, mutta myös pienemmät vammat tai raskas ja pitkittynyt kuormitus voivat vaikuttaa nivelsiteeseen heikentävästi. Nivelsidevamma liittyy usein myös murtumaan käsivarressa.

Nykyään useimmat vakavat TFCC-vammat hoidetaan kirurgisesti. Vähemmän vakavia vammoja voidaan kuntouttaa käsiharjoittelulla ja ortoosilla. Proxi® TFCC Strap on suunniteltu käytettäväksi ennen leikkausta epävakauden vähentämiseksi sekä käden lujouden ja toiminnan ylläpitämiseksi. Tukea voidaan käyttää myös leikkauksen jälkeen kuntoutuksessa.



Mediroyal Proxi® TFCC on kehitetty yhdessä professori Simon Farnebon kanssa Ruotsissa. Mallissa on U-muotoinen stabilointielementti, joka on sijoitettu kyynärluun (ulnan) puolelle tukemaan DRUniveltä kuormituksen aikana. U-muotoinen tukielementti on valmistettu molekyyliunnetusta kestopuovista, jota voidaan säätää ilman lämpöä. Kestomuovi on laminoitu suoraan NRX® Strap -materiaalille, jonka sisäpuolella on kitkapinta, joka estää liukumisen liikkeen aikana.

DRU-nivelen tukemiseksi erikseen on kaksi dynaamista kiinnitysnauhaa, jotka ovat kiinnitetty U-muotoisen elementin kumpaankin päähän. Nauhan ensimmäinen osa on valmistettu elastisesta tarranauhasta, joka voidaan kiinnittää päärunkoon. Tämä tarjoaa lisää dynaamista tukea kyynärluun puolelle. Kiinnitysnauhan seuraava osa on valmistettu NRX® Strap PLUS -materiaalista, joka ei ole elastinen ja tarjoaa lisätukea. Nauha kiinnitetään U-muotoisen elementin päälle tarralla. Tämä tarjoaa yksilöllisen ja dynaamisen tuen DRU-nivelelle rajoittamatta ranteen venymistä tai taipumista. Tuki jättää kämmenen vapaaksi.

**Myymälähinta:** 60

**Toimitusaika:** varastotuote

## KUVAT

