

mediroyal 

Orthoses are our passion

Mediroyalin NRX®- ja ARX® Strap – *Rajattomasti vaihtoehtoja tuentaan!*



NRX **DOUBLE**®
BY MEDIROYAL
STRAP



NRX®
BY MEDIROYAL
STRAP



ARX **SOFT**®
BY MEDIROYAL
STRAP



NRX **COLORS**®
BY MEDIROYAL
STRAP



NRX **+PLUS**®
BY MEDIROYAL
STRAP


Tukikohta
Palveleva apuvälineliike

NRX[®] BY MEDIROYAL STRAP



MediRoyalin kehittämä NRX[®] Strap tarjoaa uusia mahdollisuuksia ortopediseen tuentaan. Joustavaa nauhaa voidaan käyttää kuntoutuksen aikana tuentaan tai vamman selvittämiseen. Nauhaa voidaan käyttää yksilöllisesti potilaan tarpeen mukaan. NRX[®] Strap on elastisuudeltaan eri vahvuisia, mikä mahdollistaa kompression käytön osana hoitoa. Nauhaa on myös eri levyisenä.

Mikäli vamman hoito vaatii enemmän tukea ilman lisäkompressiota, voidaan ensimmäisen nauhan päälle asettaa toinen, vahvempi nauha. NRX[®]-materiaalia voidaan leikata saksilla sopivan mittaiseksi. Lisäksi siihen voidaan tehdä myös reikiä, joita voidaan käyttää stabilointiin.

– NRX[®] Strap voidaan käytännössä käyttää ilman rajoituksia.



– Rajattomasti vaihtoehtoja tuentaan!

NRX[®] Strap on valmistettu täysin ilman lateksia. Nauhan pinta on hengittävää ja se tarttuu ihoon lisäten proprioseptiikkaa, lihaskuistia ja nivelten asentotuntoa.

NRX[®] Strap toimitetaan rullana ja sitä voidaan leikata rullasta yksilöllisesti sopivan mittaiseksi. Materiaali on helposti muokattavissa potilaan tarpeiden mukaiseksi ja nauha kiinnitetään toisesta päästä tarralla itseensä. Potilas voi myös käyttää samaa nauhaa uudelleen.

Materiaali voidaan pestä 60 ° C pesukoneessa.



mediroyal

NRX® Strap edut



+ Proprioseptiikka, nivelen asentotunto ja lihasmuisti

NRX® Strap on useita mielenkiintoisia vaikutuksia, joita voidaan käyttää kuntoutuksen hyötynä. Sisäpinnan materiaali tarttuu ihoon lisäten proprioseptiikkaa ja nivelen asentotuntoa. NRX® Strap voidaan käyttää myös asiakkaan lihasmuistin harjoittamiseen ja tukemiseen.

+ Paikallinen kompressio

Materiaalin elastisuus tarjoaa hyvän kompression, joka tukee paikallisesti haluttua niveltä ja vähentää turvotusta. Turvotus on usein pääsyy nivelen liikerajoituksiin.

+ Tuki

Kompressio ja eri NRX®-materiaalien eri vahvuudet mahdollistavat juuri oikean vahvuisen tuennan käytön. Nauhaa voidaan käyttää rajoittamaan vain tietty liikesuunta ilman, että niveltä tuetaan liikaa. Tämä sallii enemmän nivelen luonnollista liikettä ja lihasten aktiivisuutta.

+ Lämpövaikutus

NRX®-materiaali lisää lämpöä paikallisesti. Lämpö tekee lihaksista, nivelsiteistä ja kollageenista elastisempaa ja joustavampaa, joka vähentää kipua ja tulehdusta.

+ Hengittävä

NRX®-materiaalin pinta on hengittävä pitäen ihon kuivana ja lämpimänä.

+ Eri tukitasot

NRX® Strap, NRX® Strap PLUS ja NRX® Strap Double tarjoavat eri tasoisia tukivaihtoehtoja riippuen tarvittavasta tuesta. Kaikkia materiaaleja voidaan yhdistellä keskenään.

+ Ihoystävällisyys

NRX®-materiaali on testattu ihoärsytysten varalta. Materiaalin valmistuksessa ei ole käytetty lainkaan lateksia.

+ Uudelleen käytettävä ja pestävä

NRX® Strap voidaan käyttää uudelleen ja se voidaan konepestä 60 ° C.

+ Vedenkestävä


NRX®-materiaali kestää hyvin vettä, joten sitä voidaan käyttää myös vesiliikunnan aikana.

NRX[®] BY MEDIROYAL STRAP



NRX[®] Strap on monikäyttöisin ja mukautuvin versio nauhoista. Siinä on keskitason tuenta ja suuri elastisuus. Sisäpinnan materiaali lisää kitkaa iholla lisäten proprioseptiikkaa. Pinnan materiaaliin saadaan kiinnitettyä tukevasti tarranauha, jolla tuki saadaan stabiloitua paikoilleen.


NRX[®] Strap voi tehdä yksinkertaiset sovellukset, joita voi muokata tukevammaksi NRX[®] Strap PLUS:n ja NRX[®] Strap Double avulla.

- Keskitason tuenta
- Suuri elastisuus
- Sisäpinta luo kitkaa ihoa vasten ja auttaa nauhaa tarttumaan iholle

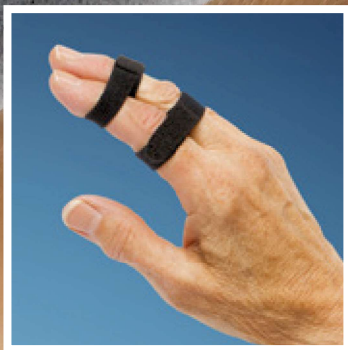

mediroyal

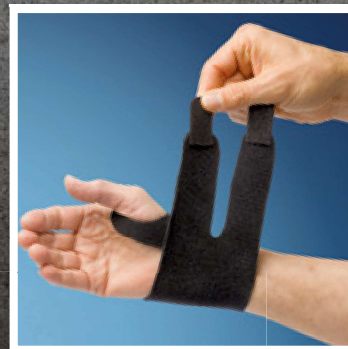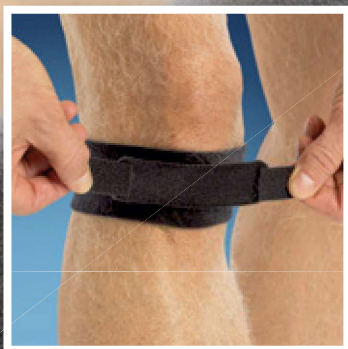

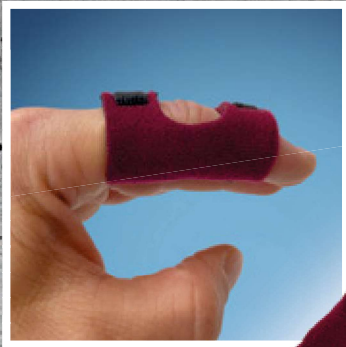

NRX[®] COLORS[®] BY MEDIROYAL STRAP

NRX[®] Strap on saatavilla seuraavina leveyksinä ja väreinä. 30 mm ja 50 mm leveyden rullien mukana toimitetaan 10 kpl valmiiksi leikattuja tarranauhoja. 110 mm leveän rullan mukana toimitetaan 5 kpl tarranauhoja.

NRX[®] Strap – 30 mm

- EU446030 NRX[®] Strap · 30 mm x 3,1 m · Musta
- EU446230 NRX[®] Strap Colors · 30 mm x 3,1 m · Sininen
- EU446330 NRX[®] Strap Colors · 30 mm x 3,1 m · Punainen

NRX[®] Strap – 50 mm

- EU446050 NRX[®] Strap · 50 mm x 3,1 m · Musta
- EU446250 NRX[®] Strap Colors · 50 mm x 3,1 m · Sininen
- EU446350 NRX[®] Strap Colors · 50 mm x 3,1 m · Punainen

NRX[®] Strap – 110 mm

- EU446110 NRX[®] Strap · 110 mm x 3,1 m · Musta
- EU446210 NRX[®] Strap Colors · 110 mm x 3,1 m · Sininen
- EU446310 NRX[®] Strap Colors · 110 mm x 3,1 m · Punainen



NRX[®] DOUBLE[®] STRAP

NRX[®] Strap Doublea käytetään useimmiten lantion tai vartalon stabilointiremminä tai jos nauhan ei ole välttämätöntä tarrautua ihoon. NRX[®] Strap Doublen molemmat pinnat ovat samanlaisia eikä siinä ole kitkaa lisäävää sisäpintaa, eli se ei tartu iholle. Nauhassa on keskivahva tuenta ja venyvyys on rajoitetumpi kuin NRX[®] Strap:ssa.

NRX[®] Strap Doublea voidaan käyttää rotaation vahvistamiseen, johon se sopii hyvin vähemmän elastisuuden ansiosta.

- Keskitason tuenta
- Rajoitettu elastisuus
- Ei kitkaa lisäävää sisäpintaa



NRX[®] Strap Double on saatavilla seuraavina leveyksinä. 30 mm ja 50 mm levyisten rullien mukana toimitetaan 10 kpl valmiiksi leikattuja tarranauhoja. 110 mm levyisen rullan mukana toimitetaan 5 kpl tarranauhoja.

NRX[®] Double – 30 mm

■ EU447030 NRX[®] Strap Double · 30 mm x 3,1 m · Musta

NRX[®] Double – 50 mm

■ EU447050 NRX[®] Strap Double · 50 mm x 3,1 m · Musta

NRX[®] Double – 110 mm

■ EU447110 NRX[®] Strap Double · 110 mm x 3,1 m · Musta

NRX[®] Double – 300 mm

– HUOM! 300 mm leveän nauhan mukana ei toimiteta valmiiksi leikattuja tarranauhoja!

■ EU447300 NRX[®] Strap Double · 300 mm x 3,1 m · Musta



NRX⁺ PLUS[®] BY MEDIROYAL STRAP

NRX[®] Strap PLUS tarjoaa vahvaa tuentaa lähes joustamattomana nauhana. Nauhan sisäpinnalla on kitkaa lisäävä pinta, joka auttaa sitä tarttumaan ihoon.

Nauhaa kuitenkin suositellaan käytettäväksi lähinnä NRX[®] Strap PLUS:n tai NRX[®] Strap Doublen päällä antamassa lisätukea.

NRX[®] Strap PLUS:aa voidaan käyttää myös suoraan iholla muiden nauhojen kiinnityskohtassa, mikäli kiinnityskohtiin tarvitaan jäykkä materiaali.

- **Vahva tuenta**
- **Ei-elastinen**
- **Sisäpinta luo kitkaa ihoa vasten ja auttaa nauhaa tarttumaan iholle**

NRX[®] Strap PLUS:aa on saatavilla seuraavina leveyksinä. 30 mm, 50 mm ja 80 mm levyisten rullien mukana toimitetaan 10 kpl valmiiksi leikattuja tarranauhoja. 110 mm levyisen rullan mukana toimitetaan 5 kpl tarranauhoja.

NRX[®] Strap PLUS – 30 mm

■ EU449030 NRX[®] Strap PLUS · 30 mm x 3,1 m · Musta

NRX[®] Strap PLUS – 50 mm

■ EU449050 NRX[®] Strap PLUS · 50 mm x 3,1 m · Musta

NRX[®] Strap PLUS – 80 mm

■ EU449080 NRX[®] Strap PLUS · 80 mm x 3,1 m · Musta

NRX[®] Strap PLUS –110 mm

■ EU449110 NRX[®] Strap PLUS · 110 mm x 3,1 m · Musta

