



mediroyal 

Orthoses are our passion

SRX ®

BY MEDIROYAL

*Support during Activity,
taking you further.*

UUSI!

SRX® on rekisteröity tavaramerkki
Mediroyal Nordic AB, Ruotsi
© Mediroyal Nordic AB, Ruotsi 2022


Tukikohta
Palveleva apuvälineliike






BY MEDIROYAL

SRX®-tukimallisto on suunniteltu tukemaan ihmisiä erityisesti liikunnassa ja urheilussa. Mallisto perustuu uuteen innovatiiviseen SRX®-materiaaliin, jonka kolmiulotteinen pintamateriaali tarjoaa sekä kimmoisuutta että puristusta. Materiaalin ytimessä on CR-vahtoa (neopreeni), joka pienien suljettujen mikroilmakenttien johdosta tuo keveyttä ja on lämpöä eristävää.

Materiaalin sisäpinnassa on Neptune™ vuori, joka siirtää nopeasti hien pois iholta ja kuivuu nopeasti. Tukien materiaalit yhdistettynä toimivaan muotoiluun, sekä ajatus skandinaavien aktiivisesta elämäntavasta, ovat ratkaisevat tekijät SRX® mallistossa.

Support during Activity, taking you further.

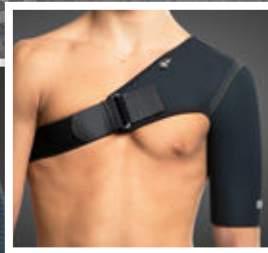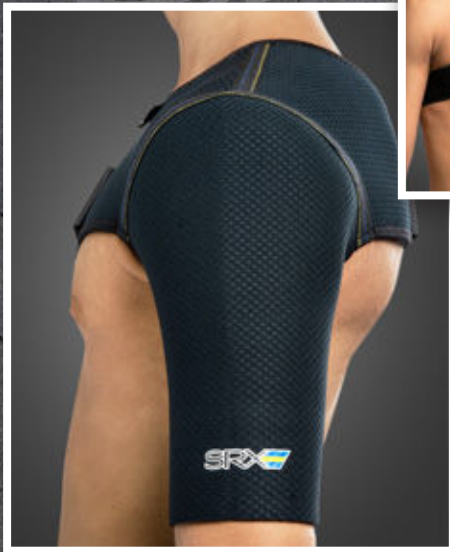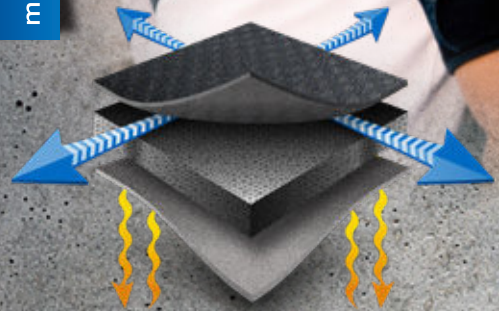

SRX810 · SRX® Olkatuki

Olkatuki on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista, joka antaa käyttäjälle tukea ja kompressiota sekä lämmittää paikallisesti. Tuote on materiaaliltaan ohut, istuvuudeltaan

hyvä ja todella toiminnallinen. Tuotteen kiinnitys voi olla vasemmalla tai oikealla puolella ja puolisuuden voi vaihtaa kääntämällä kiinnitysremmiä. Olkatukea voi käyttää paikallisten tulehdustilojen ja lievän instabiliteetin hoitoon, sekä tilapäiseen lihasten revähdyksestä johtuvan kivun hoitoon.

Koko	XS	S	M	L	XL
cm	24–28	28–32	32–35	35–38	38–41

Mittaohjeet: Ympärysmitta mitataan olkavarren keskikohdasta.



SRX811 · SRX® Olkatuki X

Olkatuki X on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista. Tuessa oleva ristiremmi olkapäässä takaa lisää yksilöllistä tukea ja vakautta olkanivelelle. Olkavarren osan alapinnassa oleva NRX®-materiaali yhdessä alareunan tarrakiinnityksen kanssa pitävät tuen hyvin paikoillaan. Tuotetta voi käyttää sekä vasemmalla että oikealla muuttamalla remmin kiinnitystä. Olkatukea voi käyttää paikallisten tulehdustilojen hoitoon, lievään instabiliteettiin sekä tilapäiseen lihasten revähdyksestä johtuvan kivun hoitoon.

Koko	XS	S	M	L	XL
cm	24–28	28–32	32–35	35–38	38–41

Mittaohjeet: Ympärysmitta mitataan olkavarren keskikohdasta.



SRX820 · SRX® Kyynärtuki

Kyynärtuki on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista. Se antaa kyynärnivelle tukea ja kompressiota sekä lämmittää paikallisesti. Tuotteen kolmesta osasta tehty toiminnallinen muotoilu ja kyynärtaipeen erityisohut materiaali takaavat tuotteen linjakkuuden. Tuotteen säädettävyyttä lisäävät tarrakiinnitykset tuotteen ylä- ja alaosissa. Kyynärtukea voi käyttää paikallisen tulehduksen, lihavammojen sekä lievän instabiliteetin hoitoon..

Koko	XS	S	M	L	XL
cm	20–23	23–25	25–28	28–31	31–33

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan kyynärnivelen kohdalta.



SRX821 · SRX® Universal Kyynärtuki

Universal Kyynärtuki on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista ja siinä on kietaistava kaksiosainen kiinnitys. Se tukee, antaa kompressiota ja lämmittää paikallisesti. Kyynärnivelen ylä- ja alapuoli ovat erikseen säädettävissä tarrakiinnityksellä. Tuen ulkopinta on kauttaaltaan silmukkamateriaalia, johon tarrapinta kiinnittyy mihin tahansa. Kyynärtukea voi käyttää paikallisten tulehduksien, lihavammojen tai lievän instabiliteetin hoitoon.

Koko	Yksi koko
cm	20–30

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan kyynärnivelen keskikohdan ympäri.



SRX822 · SRX® Universal Kyynärpään tukihaha

Elastinen kyynärnivelen tukihaha on valmistettu pyörökudosta materiaalista. Se antaa kevyttä tukea ja kompressiota kyynärnivelen alueelle. Kyynärnivelen tukihahaa voi käyttää paikallisen tulehduksen, lihaskipujen tai lievän instabiliteetin hoitoon.

Koko	Yksi koko
cm	22–28

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan kyynärnivelen kohdalta.





SRX823 · SRX® Tenniskyynärpäätuksi

Tenniskyynärpäätuksi on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista ja sen sisäpinnalla on Neptune™ vuoraus. D-lenkillisen kiinnityksen alapinnalle on asetettu tukipelotti, joka antaa kevyttä tukea lihaksille. Elastinen hihna antaa dynaamista kompressiota ja pitää tuen paikoillaan liikunnan aikana. Tarrakiinnitys tekee tuesta monipuolisesti ja joustavasti kiinnitettävän. Tukea voi käyttää niin tenniskyynärpää- kuin golfkyynärpäävaivoissa.

Koko
cm

Yksi koko
20–32

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan 5cm kyynärnivelen alapuolelta.



SRX215 · SRX® Tukeva tenniskyynärpäätuksi

Tukeva tenniskyynärpäätuksi on tehty joustamattomasta kaksinkertaisesti laminoidusta kankaasta. Tuessa on tarrakiinnitteinen pelotti, joka mahdollistaa tuen yksilöllisen istuvuuden. Tukiremmi on joustamatonta antaen vahvan tuen lihaksille. Tarrakiinnitys takaa monipuoliset säätömahdollisuudet. Tukevaa tenniskyynärpäätuksia voi käyttää sekä tenniskyynärpää- että golfkyynärpäävaivoissa.

Koko
cm

Yksi koko
20–32

Mittausohje: Ympärysmitta mitataan 5cm kyynärnivelen alapuolelta.



SRX824 · SRX® Universal Rannetuki

Rannetuki on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista, jonka alapinnassa on Neptune™ vuori. Elastinen tuki ranteen ympäri antaa hyvän tuen ja puristeen. Tarrakiinnitys tekee säädöistä monipuoliset ja mukautuvat. Rannetukea voi käyttää paikallisten lihaskipujen sekä instabiliteetin hoitoon. Tuki sopii myös tenniskyynärpään hoitoon vähentäen ranteen liikkeitä ja kuormitusta.

Koko
cm

Yksi koko
12–20

Mittausohjeet: Ymprysmitta mitataan ranteen ympäri.



SRX825 · SRX® Universal Peukalorannetuki

SRX® Universal Peukalorannetuki on tehty 1,5mm:stä SRX®-materiaalista, jonka ulkopinta on silmukkamateriaalia ja sisäpinnalla on Neptune™ vuoraus. Peukalolenkki kiinnittyy peukalon ympäri ja rannehihna kiertyy ranteen ympäri antaen kevyen tuen sekä peukalolle että ranteelle. Tarrakiinnitys tekee säädöistä monipuoliset ja mukautuvat. Tukea voi käyttää paikallisen tulehduksen hoitoon sekä ranteen rasitustilojen, lihaskipujen tai lievän instabiliteetin hoitoon.

Koko
cm

Yksi koko
12–20

Mittausohjeet: Ymprysmitta mitataan ranteen ympäri.



SRX826 · SRX® Rannetuki Wrap

Rannetuki Wrap on tehty 1,5mm:stä SRX®-materiaalista, jonka ulkopinta on tarrakiinnittyvää silmukkamateriaalia ja sisäpinnalla on Neptune™ vuoraus. Tuotteen peukaloaukko on helposti puettavissa peukalon ympärille, jonka jälkeen tuki kierretään ranteen ympäri ja elastinen hihna vahvistaa kiinnityksen. Tarrakiinnitys tekee tuesta tukevan, monipuolisen sekä joustavan käyttä. Rannetukea voi käyttää paikallisen lihaskivun tai instabiliteetin hoitoon. Tuki sopii myös tenniskyynärpään hoitoon vähentäen ranteen liikkeitä ja kuormitusta.

Koko
cm

Yksi koko
12–22

Mittausohjeet: Ymprysmitta mitataan ranteen ympäri.





BY MEDIROYAL

Support during Activity, taking you further.


mediroyal




SRX840 · SRX® Selkätuki

Selkätuki on tehty 5mm:stä SRX®-materiaalista, joka tukee ja lämmittää alaselkää. Tuen sisäpinnan Neptune™ - materiaalin ansiosta se on päällä miellyttävän tuntuinen ja nopeasti kuivuva. Tukea on helppo käyttää ja säätää edessä olevan tarrakiinnityksen avulla.

Selkätukea voi käyttää väliaikaisen alaselän kivun hoidossa, lihasrasituksessa tai kun halutaan kevyttä tukea.

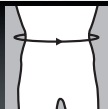
Koko	S	M	L	XL	XXL	
cm	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	

Mittausohjeet: Ympärymitta mitataan vyötärön ympäri.

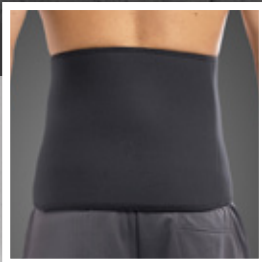


SRX841 · SRX® Selkätuki Stable

Vahva selkätuki on tehty hengittävästä elastisesta materiaalista ja sen linjakkuuden ansiosta tukea on miellyttävä käyttää vaatteiden alla. Tuen selkäpuolella on muoviset vahvikkeet alaselän tukemiseen. Tuki pysyy hyvin paikallaan alaselän alueella olevan liukumattoman materiaalin ansiosta. Lisätukea antaa kaksoistarrat, jotka kiinnittyvät vartalon eteen lisäten yksilöllistä tukea ja puristetta. Selkätukea voi käyttää väliaikaisen alaseläkivun hoitoon, selän rasitustiloissa tai kun halutaan alaselän alueelle lisätukea aktiviteetin aikana.

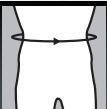Koko	S	M	L	XL	
cm	60–75	75–90	90–120	120–150	

Mittausohjeet: Ympärymitta mitataan vyötärön ympäri



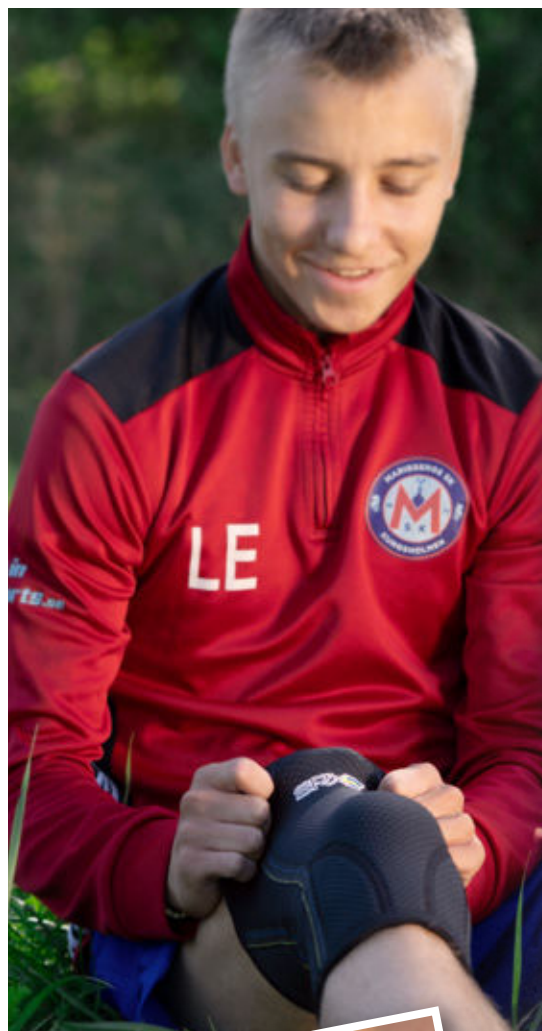

SRX852 · SRX® Polvituki Multisport

SRX® Polvituki Multisport on tehty 5mm:stä SRX®-materiaalista. Polvitaiepeessa materiaali on kuitenkin ohennettu 3mm:ksi. Materiaalin leikkaus, anatominen muotoilu ja materiaalivalinnat on tehty niin, että saliharjoittelun syväkyykytkin sujuvat miellyttävästi sivupaneelit tekevät tuesta joustavamman liikkeen aikana. Tuki on suunniteltu etenkin multisport- ja cross fit- lajeihin. SRX®-materiaali on vuorattu Neptune™ materiaalilla, joka tekee tuesta erityisen miellyttävän ja nopeasti kuivuvan. Polvitukea voi käyttää paikallisen tulehduksen, turvotuksen tai yllirasitustilan hoidossa sekä lievän instabiliteetin tai väliaikaisen polvikivun hoidossa.

Koko	S	M	L	XL
cm	33–36	36–39	39–42	42–45

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan polvinivelen ympäri.



SRX860 · SRX® Polvituki Impact

SRX® Polvituki Impact on kehitetty suojaamaan polvea iskuilta urheilun aikana. Polvitueessa on polvityyny CR15-vaahdomateriaalista ja siinä on Kevlar® vuoraus. Tuen perusmalli on kuin SRX852, mutta on aavistuksen lyhyempi edestä. Anatominen muotoilu takaa hyvän tuen ja istuvuuden ja sivupaneelit tekevät tuesta joustavamman liikkeen aikana. Sisäpintaan laminoidun Neptune™ vuoren ansiosta tuki on miellyttävän tuntuinen ja nopeasti kuivuva. Polvitukea voi käyttää paikallisen tulehduksen, turvotuksen tai yllirasitustilan hoitoon, sekä lievän instabiliteetin ja väliaikaisen polvikivun hoitoon tai suojaamaan polvea iskuilta.

Koko	S	M	L	XL
cm	33–36	36–39	39–42	42–45

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan polvinivelen ympäri.



SRX854 · SRX® Polvinauha

SRX® Polvinauha on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista. Sen sisäpinta on paikallaan pysyvää ja ulkopinnalla on tarrapitävää silmukkamateriaalia. Pitävä sisäpinta takaa hyvän istuvuuden ja ihokontaktin sekä estää tukea liikkumasta liikkeen aikana. Tuessa on tukityyny, joka asetetaan polvilumpiojanteen päälle. Tuessa on lisäksi tarranauha, joka mahdollistaa tuen yksilöllisen säädön ja sopivan tukevuuden. SRX® Polvinauhaa voi käyttää paikallisen tulehduksen hoidossa, hyppääjän polvi -ongelmissa sekä Osgood-Schlatter taudin hoidossa.

Koko	XXS	XS	S	M	L
cm	26–29	29–32	32–35	35–38	38–42

Mittausohjeet: Ympärymitta mitataan polvinivelen ympäri.



SRX855 · SRX® Polvinauha Universal

Tämä yksinkertainen, monikäyttöinen, yhden koon polvinauha on tehty SRX®-materiaalista ja sen ulkopinta on silmukkamateriaalia. Tuen muotoilu on ideaalinen polvilumpiojanteen ongelmien hoidossa. Tarrakiinnitys tekee säädöistä monipuoliset ja helpot. Polvilumpiojanteen päälle tuleva tyynypehmuste takaa kevyen tuen. Puristeen voimakkuus on säädettävissä tukea kiristämällä. SRX® Polvinauha Universalia voi käyttää paikallisen tulehduksen hoidossa, lievissä hyppääjän polvi -ongelmissa sekä lievän Osgood-Schlatter taudin hoidossa.

Koko	Yksi koko
cm	29–42

Mittausohjeet: Ympärymitta mitataan polvinivelen ympäri.





SRX850 · SRX® Polvituki

Polvituki on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista, jossa on miellyttävä Neptune™ sisäpinta. Tuki istuu polveen hyvin anatomisen muotoilun ansiosta ja se lämmittää polvea liikkeen aikana. Polvitukea voi käyttää paikallisen tulehduksen tai turvotuksen hoidossa, ylläsitustiloissa sekä lievän instabiliteetin tai väliaikaisen polvikivun hoidossa..

Koko	XS	S	M	L	XL	XXL
cm	29–32	32–35	35–38	38–42	42–46	46–50

Mittausohjeet: Ympärymitta mitataan polvinivelen ympäri.

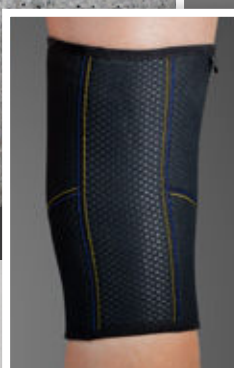

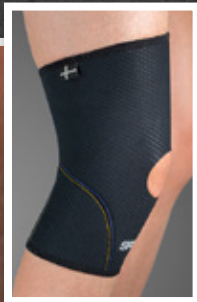

SRX851 · SRX® Polvituki lumpioaukolla

Polvituki on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista, jossa on miellyttävä Neptune™ sisäpinta. Tuen polvilumpioaukko vähentää lumpioon kohdistuvaa painetta ja samalla se tukee kevyesti polvilumpiota. Anatominen muotoilu takaa tuen hyvän istuvuuden ja toiminnallisuuden sekä paikallisen lämmittävän vaikutuksen aktiivisuuden aikana. Polvitukea voi käyttää paikallisen tulehduksen, turvotuksen tai ylläsitustilaan hoitoon. Se sopii myös lievän instabiliteetin tai väliaikaisen polvikivun hoitoon.

Koko	XS	S	M	L	XL	XXL
cm	29–32	32–35	35–38	38–42	42–46	46–50

Mittausohjeet: Ympärymitta mitataan polvinivelen ympäri.



SRX856 SRX® Polvituki Wrap

SRX® Polvituki Wrap on malliltaan lyhyt ja sen vuoksi hyvin monipuolisesti sovitettavissa myös pluskokoiisiin reisiin ja pohkeisiin. Tuki on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista: ulkopinta on tarratarttuvaa silmukkamateriaalia ja sisävuoraus on Neptune™-materiaalia. Tuessa on sivuilla spiraalivahvikkeet tuomassa lisätukea ja kaksi elastista tarraa, jotka voi kiinnittää mihin tahansa tuen pinnalla. Polvitukea voi käyttää paikallisen tulehduksen, turpoamisen tai ylläsitustilan hoidossa. Se sopii myös lievän instabiliteetin tai väliaikaisen polvikivun hoitoon.

Koko	1	2
cm	29–38	38–52

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan polvinivelen ympäri.



SRX857 · SRX® Polvituki Spiral

Polvituki Spiral on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista ja sisäpinnalla on Neptune™ vuoraus. Tuessa on lisätukena kaksi spiraalivahviketta molemmilla sivuilla ja polvilumpioaukko. Kaksi elastista ja irroitettavaa tarraa antavat tukea ja yksilöllistä kompressiota. Polvitukea voi käyttää paikallisen tulehduksen, turvotuksen tai ylläsitustilan hoidossa. Se sopii myös lievän instabiliteetin tai väliaikaisen polvikivun hoitoon.

Koko	XS	S	M	L	XL	XXL
cm	29–32	32–35	35–38	38–42	42–46	46–50

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan polvinivelen ympäri.



SRX858 · SRX® Polvituki sivukiskoilla

Polvilumpioaukollinen tuki on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista ja sen sisäpinnalla on Neptune™ vuoraus. Tuen sivuilla on komposiitista ja alumiinista valmistetut kevytrakenteiset nivelelliset sivukiskot, jotka tuovat polvelle lisätukea ja vakautta. Kaksi elastista ja irroitettavaa tarraa antavat polvinivelle yksilöllistä kompressiota. Polvitukea voi käyttää paikallisen tulehduksen, turvotuksen tai ylläsitustilan hoidossa. Sitä voi käyttää myös kohtalaisten ligamentti- tai kierukkavammojen hoitoon.



Koko	XS	S	M	L	XL	XXL
cm	29–32	32–35	35–38	38–42	42–46	46–50

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan polvinivelen ympäri.




SRX859 · SRX® Polvituki Wrap sivukiskoilla

Polvituki Wrap sivukiskoilla on monipuolisesti sovitettavissa pluskokosiinkin reisiin tai pohkeisiin. Tuki on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista: ulkopinta on tarratarttuvaa silmukkamateriaalia ja sisävuoraus on Neptune™-materiaalia. Tuen sivuilla on komposiitista ja alumiinista valmistetut kevytrakenteiset nivelelliset sivukiskot tuomaan polvelle lisätukea ja vakautta. Kaksi elastista ja irroitettavaa tarraa antavat polvinivelle yksilöllistä kompressiota. Polvitukea voi käyttää paikallisen tulehduksen, turvotuksen tai ylläsitustilan hoidossa. Sitä voi käyttää myös kohtalaisten ligamentti- tai kierukkavammojen hoitoon.

Koko	1	2
cm	29–38	38–52

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan polvinivelen ympäri.

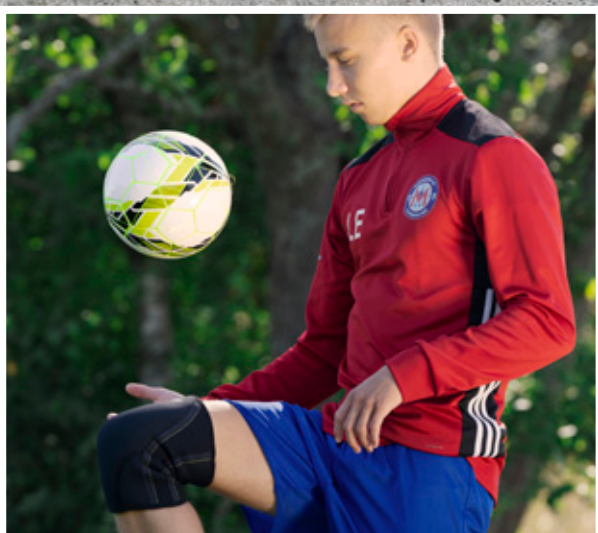



SRX870 · SRX® Pohjetuki

SRX® Pohjetuki on tehty 1,5 mm:stä SRX®-materiaalista, jossa on Neptune™ sisävuoraus. Tuki on korkeaelastista kompressiomateriaalia, joka antaa hyvän tuen pohjelihaksille. Kaareva, anatominen muotoilu pohkeiden alueella antaa lihaksille tehoa liikkeen aikana. Tuotteen puriste on erilainen riippuen tuotteen koosta. Pienempi koko antaa vahvemman puristeen. Tuen alaosassa on kolme stop-saamaa, jotka mahdollistavat tuen pituuden muuttamisen tarvittaessa. Tukea voi käyttää lihasvammojen tai –kivun hoidossa, paikallisen tulehduksen tai akillesalueen ongelmien hoitoon.

Koko	XS	S	M	L	XL	XXL
cm	33–34	34–37	37–40	40–42	41–44	43–46

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan pohkeen paksuimman kohdan ympäri.

Huomioitavaa on, että pohkeen muoto voi vaikuttaa tuen yksilölliseen istuvuuteen. Tuen pituutta voidaan lyhentää akillesen yläpuolelle, jos se on liian pitkä. Leikkaa tuotetta stop-sauman alapuolelta.



SRX871 · SRX® Nilkkatuki

SRX® Nilkkatuki on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista, jossa on Neptune™ vuoraus sisäpinnalla. Materiaali antaa hyvää tukea ja puristetta sekä lämmittää paikallisesti. Jalan alle kiinnitetty elastinen remmi antaa nilkalle lisää tukea ja puristetta. Nilkkatukea voi käyttää lämmittävänä ja kevyenä tukena ja puristeena nilkan ympärillä lievän nilkkavamman jälkeen.

Koko	XS	S	M	L	XL
cm	19–20	20–21	21–23	23–25	25–27
Kengän koko EUR	35–37	38–40	40–42	42–44	44–46

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan nilkan ympäriltä, malleolin yläpuolelta. Kengän kokoa voi myös käyttää koon määrittäjänä. Jos ympärysmitta ja kengän koko eivät kohtaa, kannattaa nilkkatuen koko valita ympärysmittan mukaan.



SRX872 · SRX® Nilkkatuki Universal

Yhden koon nilkkatuki on pyörökudottua kangasta, jossa on elastista kierrelankaa. Se tuo nilkalle kevyttä tukea ja puristetta. Jalan alle kiinnitetty elastinen remmi tuo nilkalle lisätukea ja puristetta. Nilkkatukea voi käyttää kevyenä tukena ja puristeena lievän nilkkavamman jälkeen.

Koko	Yksi koko
cm	18–24

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan nilkan ympäri, malleolin kohdalta.



SRX875 · SRX® Nilkkatuki Stable

Vahva, nauhoitettu nilkkatuki on nylon-materiaalia ja se on vuorattu ilmaverkkomateriaalilla. Akilleksen ympärillä on elastinen, joustava alue vähentämään janteen puristetta. Iltti on SRX® puristettua CR-vaahtoa. Säädettävyyttä ja yksilöllistä vakautta tuovat nylon-remmit kulkevat ristikkäin jalan alta ja kiinnittyvät tuen molemmille sivuille. Leveä nauha tuen yläreunassa pitää kiristetyt nauhat ja remmit paikoillaan. Nilkkatukea voi käyttää nilkan mekaanisena tukena ja vakauttajana lievän tai kohtalaisen nilkkavamman jälkeen. Tai sitä voidaan käyttää tukemaan löysää nilkkaa liikunnan aikana.

Size	XS	S	M	L	XL
cm	19–20	20–21	21–23	23–25	25–27
Kengän koko EUR	35–37	38–40	40–42	42–44	44–46

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan nilkan ympäri, malleolin kohdalta. Kengän kokoa voi myös käyttää koon määrittäjänä. Jos ympärysmitta ja kengän koko eivät kohtaa, kannattaa nilkkatuen koko valita ympärysmittan mukaan.





SRX880 · SRX® Lämpö- & Kompressiohousut

SRX® Lämpö- & Kompressiohousut ovat yhdistelmä erityisen joustavaa 0,7mm:stä CR-materiaalia ja 1mm:stä SRX®-kompressiomateriaalia. Housujen sisäpinnassa on Neptune™ vuori. SRX® kompressiomateriaali on tehty korkeatiheisemmästä materiaalista. Sitä on käytetty reiden etuosassa ja nivusten alueella antamaan hyvää tukea ja puristusta. Housujen takaosa on etuosaa korkeampi antaen alaselkään lämpövaikutusta. Vyötärön ympärillä on säädettävä kiristysnyöri. Housuja voi käyttää paikalliseen lihasten lämmitykseen tai tukemaan pakaroita, reisiä ja nivusaluetta. Puriste voi parantaa verenkiertoa ja elastisuutta alueen lihaksistossa.

Koko	XS	S	M	L	XL
cm	60–75	70–85	80–95	90–105	105–115

Mittausohjeet: Vyötärön ympärysmitta on määrittävä tekijä kokoa valittaessa, vaikkakin vartalon rakenne voi vaikuttaa tuotteen istuvuuteen. Materiaali on ultrajoustavaa, joten sama ympärysmitta voi mennä kahteen eri kokoon.



SRX990 · SRX® Kylmä Wrap – polvelle, nilkalle, kyynärpäälle, olkapäälle

SRX® Kylmä Wrap on monikäyttöinen, jäällä ja vedellä täytettävä tuote, joka voidaan kietoa loukkaantuneen ruumiinosan ympärille. Tuote sisältää jääpussin ja kääreen, jossa on kaksi pitkää tarraa pitämään tuotteen paikallaan olkapään, kyynärpään, polven tai nilkan ympäri. Kylmä Wrapia tulee käyttää vain 20–30 min kerrallaan. Tuotetta ei saa pukea suoraan paljaalle iholle vaan alla tulee olla pyyhe suojaamaan ihoa. Kylmä Wrapia voi käyttää akuutin vamman kylmähoidossa.

Yksi koko



SRX700 · SRX® Kompressiosukat · Valkoinen SRX701 · SRX® Kompressiosukat · Musta



SRX® Kompressiosukat on kehitetty yhdessä Ruotsin käsipalloliiton kanssa Ruotsin mies- ja naiskäsipallomaajoukkueille.

Sukissa on asteittainen, lääkinällinen puriste (puristeluokka, ccl 2), joka vähentää pohjelihasten väsymistä pitkäkestoisen urheilun aikana. Sukat on uniikki yhdistelmä kuituja: kestävä ja miellyttävää bambu-kuitua, aktiivista antimikroobista puuhiiltä ja nylonia. Sukkien elastinen kuitu on lateksitonta lycraa. SRX® sukissa on anatoniminen muotoilu; pohje on ympärystitoiltaan suurempi ja puristeltaan voimakkein alue on nilkassa, josta puriste kevenee asteittain. Varpaiden ja kantapään alueet on vahvistettu, jotta ne ovat kestävä extreme-urheilussa. Sukkien yläosa on joustava ja puristamaton. Sukkien pituus on joustava, jolloin se sopii sekä normaaleille että pitkille säärille.

SRX®Kompressiosukat vähentävät pohjelihasten väsymistä, nopeuttavat toipumista, ehkäisevät turvotusta vamman jälkeen ja parantavat nivelen liikkeen laajuutta.



Koko	Kengän koko	Pohje ymp.	Nilkka ymp.
XS	34–37	23–33 cm	16,5–19 cm
S	37–39	28–38 cm	19–21,5 cm
M	40–43	33–45,5 cm	21,5–24 cm
L	44–47	35,5–46 cm	23–26,5 cm
XL	48–	38,5–51,5 cm	26,5–32 cm

Mittaohjeet: Ympärysmitta mitataan pohkeen paksuimmasta kohdasta ja nilkan ympäri. Kengän koko on myös koon määrittäjä. Jos ympärysmittat ja kengän kokomittat eivät kohtaa, kannattaa sukien koko valita ympärysmittojen mukaan.



Nopea kuivuminen



Nopeuttaa palautumista



Hyvä eristyskyky



Lisää verenkiertoa



Antibakteerinen ja luonnollinen hajunpoistaja



UV-kestävä

SRX042 · SRX® Urheilulaukku · Musta

Vesitiivistä urheilulaukku (tilavuus 42 litraa) voi käyttää myös selkäreppuna. Se on valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä materiaalista (nailon, TPU). Olkahihnoissa on solkikiinnitykset, joten hihnat ovat helposti ja nopeasti irroitettavissa. Laukun päällä on läpinäkyvä tasku käyntikortille. Laukun toisella sivulla on teksti SRX® by Mediroyal.



SRX[®]

Mediroyal Nordic AB on ruotsalainen lääkinällisiin tuotteisiin keskittynyt yhtiö, joka kehittää toiminnallisia ortotiikan ratkaisuja yli 20 vuoden kokemuksella.

Me tuotamme omat tuotteemme ja materiaalimme omissa tuotantolaitoksissamme Taiwanissa, Kiinassa, ja viemme tuotteita yli 50 maahan.

Orthoses are our passion


Tukikohta
Palveleva apuvälineliike

Turun Tukikohta Oy
www.turuntukikohta.fi
tilaus@turuntukikohta.fi
p.0207619030

mediroyal 

Mediroyal Nordic AB
Box 7052 · Staffans väg 6B · SE-192 07 Sollentuna · Sweden
info@mediroyal.se · www.mediroyal.se