



mediroyal


Orthoses are our passion

NRX® HEAT TAPE &  
LOOP HEAT TAPE

**Heat Tape materiaaleille**

NRX® lämpöteipit ovat lämpöaktivoituja teippejä, joita voidaan käyttää kahden materiaalin kiinnittämiseen yhteen ompelematta. Sen lisäksi lämpöteippejä voidaan käyttää myös NRX® Strap-nauhojen vahvikkeina antamaan vahvempaa tukea tai vähentämään elastisuutta. Lämpöteippejä on helppo käyttää, ne kiinnitetään silitysraudalla leivinpaperia materiaalin ja raudan välissä käyttäen. Suositeltu lämpötila liiman aktivoimiseksi on 120–140 astetta ja asennusaika noin 10 sekuntia. Tätä saattaa joutua säätämään riippuen materiaalin pinnasta ja koostumuksesta.

Lämpöteippejä on kahta eri vaihtoehtoa  
– NRX® Heat Tape and NRX® Loop Heat Tape.

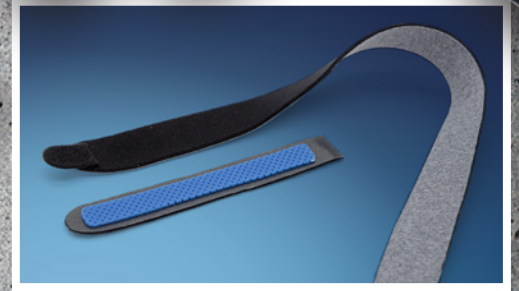

#### NRX® Heat Tape

Ohut nylon-nauha lämpöaktivoituvalla liimalla. Nauhaa voidaan käyttää materiaalien yhteen kiinnittämiseen tai NRX® Strap-nauhan joustavuuden rajoittamiseen. Saatavana 22 mm ja 35 mm leveinä rullina sekä 30 cm leveänä.

- EU490001 NRX® Heat Tape · 22 mm leveys x 10 m rulla · Musta
- EU490002 NRX® Heat Tape · 35 mm leveys x 10 m rulla · Musta
- EU490004 NRX® Heat Tape · 30 cm leveys x 1 m rulla · Musta

#### NRX® Loop Heat Tape

Tämän materiaalian yläpinta on tarrakiinnittyvää "pörröä" ja alapinta lämpöaktivoituvaa liimaa. Sillä voidaan lisätä tarrakiinnityspintaa alueille, joihin on vaikea ommella. Tai laminoida lämpömuovivahvike NRX Strap-nauhaan lisävahvikkeeksi ja vakauttajaksi. Saatavana 50 mm ja 30 cm leveinä.

- EU490090 NRX® Loop Heat Tape · 50 mm x 5 m · Musta
- EU490091 NRX® Loop Heat Tape · 30 cm x 1 m · Musta

**Tukikohta**  
Palveleva apuvälineliike

Mediroyal Nordic AB  
Box 7052 · Staffans väg 6B · SE-192 07 Sollentuna · Sweden · info@mediroyal.se · www.mediroyal.se

Turun Tukikohta Oy · www.turuntukikohta.fi · tilaus@turuntukikohta.fi · p.0207619030